



Ortopedik aletler ve ayakkabılar Foot and Ankle Products

Preventif, postoperatif ve diyabet bakımı için / Preventive, postoperative and for diabetic footcare

DARCO

Kuzey Amerika / North America

DARCO International
Huntington, West Virginia / USA

Avrupa / Europe

DARCO GmbH & Co. KG
Raisting, Germany

Asya / Asia

DARCO Int. Trade Lt.
Shanghai, China



DARCO – Tüm ayak ürünlerinde tek yetkili ortağınız – Your partner for footcare products

Sargı ayakkabıları, ameliyat sonrası giyilen ayakkabılar ve yükü azaltan ayakkabılar gibi özel ayakkabılar ve yeni yardım aletleri konusunda uzmanlaşmış DARCO Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin'deki şubeleriyle uluslararası şirketler grubu oluşturmaktadır.

Tamamen »Innovation in Foot Care Technology« prensibine dayanarak DARCO kendini bilgi elçisi olarak göstermektedir. Tüm dünya çapında gerçekleşen workshop, eğitim, sempozyum ve fuarlar araştırmalarımızın şu anki durumunu yayımlamakta ve doktorlara tartışmaya açmaktadır.

Postoperatif ayakkabı, sargı ayakkabısı ve castboot alanında dünya genelinde önde gelen bir işletme olarak, DARCO bir çok klinikte, ameliyat merkezlerinde ve özel ayak cerrahisi muayenahanelerinde kendini uluslararası kabul ettirmiştir.

Tüm dünyada ayak cerrahisi uzmanlarıyla, uluslararası hekim birlikleriyle ve biyomekanik bilimsel kurumlarla yakın işbirliğimiz, devam eden gelişme çalışmalarımızın, ürünlerimizin gösterdiği etkinin ve kalitemizin temelidir. Sadece bu şekilde en yeni bilgileri ve tecrübeleri pratikten ürünlerimize aktarabilir, sağlam ayaklar üzerinde durabiliriz – çünkü biz zorlukların aşılmasını kendimize ilke edindik.

Ayakkabı/bandaj alanında gelişmemizin şu anki esas noktası mesela açık yaralar ve ülserasyonlar bulunan diyabetik ayaklardır.

DARCO is an international group with locations in USA, Europe and China. We are specialized in innovative products and shoes such as cast boots, postoperative shoes and pressurerelief shoes.

According to our guiding principle of »Innovation in Footcare Technology« DARCO acts constantly as an ambassador of knowledge. Worldwide workshops, training events, symposiums and exhibitions publicize the current state of our research work and release it for discussion by physicians.

DARCO has established itself internationally in most hospitals, surgical centers and special foot surgery practices as a world leader in the field of post-op shoes, all-purpose shoes and cast boots.

Our close cooperation with foot surgery specialists around the world, international medical associations and biomechanical institutes constitutes the basis of our permanent development work and the reason for the outstanding efficiency and quality of our products. This is the only way that we can incorporate the latest findings and hands-on experiences in our products and also stand firmly on our own two feet. That is the challenge for our company.

Our developments in the field of shoes and bandages are currently focused on the diabetic foot with open wounds and ulcerations.

İçerik / Index



Postoperatif bakım / Postoperative Care

- | | |
|---|--|
| 5 OrthoWedge™
OrthoWedge™ light | 9 Puzzle Insole
TAS™ |
| 6 HeelWedge™
MedicalSurgical™ /-ST | 10 NightSplint™
BodyArmor® Night Splint |
| 7 MedicalSurgical™ Pediatric
A.P.B.™ | |
| 8 TwinShoe
PegAssist™ System | |



Travma bakımı / Trauma Care / Sportsline

- | | |
|---|--|
| 13 BodyArmor® CastShoe™
SlimLine™ | 17 ActiveAnkle® Chameleon Brace™
SpiderBrace™ |
| 14 SlimLine™ Pediatric
BodyArmor® Walker II | 18 DARCO Standard Tape
DARCO Underwrap |
| 15 Walker FXPro™
AirTraveler™ Walker | 19 DARCO Elastic Tape
DARCO Tape-Kit |
| 16 ActiveAnkle® T2
ActiveAnkle® Multi-Phase™ | 20 Heelift® Traction Boot |



Diyabet bakımı / Diabetic Care

- | |
|---|
| 22 Heelift® Suspension Boot
Heelift® Smooth Boot |
| 23 WCS™
Elbowlift® |

- | |
|------------------------------------|
| 24 Ölçüler / Sizes |
| 25 Ürün listesi / Article List |
| 30 Bilimsel arařtırmalar / Studies |



Postoperatif bakım
Postoperative Care

OrthoWedge™

Ayak ön kısmının yükünü hafifleten ayakkabı / Off-loading Shoe



İstek üzerine ucunu kapatmak için ekleme sipariş verilebilir /
Toe Cap optional available

Bilimsel araştırma DARCO'dadır /
Study available at DARCO

- > Halluks valgus ve çekiç parmak ameliyatları sonrası
- > Ayağın ön kısmındaki ülserasyonların iyileşmesinde

- > 5 ölçüde bulunur: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.5038

- > use after surgeries to correct hallux valgus, hammer toes / Tailor's bunions
- > treatment of diabetic ulcerations

- > 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)
- > Colour: Black
- > right and left side

> patent protected

OrthoWedge™ özellikle ayağın ön kısmında yükü hafifletmek ve ayağın ön kısmını korumak için geliştirilmiştir. Kesintisiz tabanı hastayı aşağıdan korur, mesela merdivenlerde veya sokak kirlerinden. İç taban işlenmek üzere çıkarılabilir.

Hafifleten kamanın patentli dizaynı ile ağırlık ayağın orta ve arka bölümlerine dağıtılır. Açma imkanı ve cırtlı kemerlerle ayarlanabilir genişliği sayesinde, ayakkabı kolayca giyilebilir.

The OrthoWedge™ Off-loading Shoe is specifically designed to protect the forefoot by removing most of the pressure from the metatarsal head and digits during the weight-bearing portion of the gait cycle. For postprocessing the sole can be taken out.

The patented construction of the wedge obtains an off-loading mechanism. The weight is notably reduced at the forefoot. Velcrostraps makes opening easily and allows a comfortable fitting.

OrthoWedge™ light

Ayak ön kısmının yükünü azaltan ayakkabı / Off-loading Shoe



Bilimsel araştırma DARCO'dadır /
Study available at DARCO

- > Halluks valgus ve çekiç parmak ameliyatları sonrası
- > Ayağın ön kısmındaki ülserasyonların iyileşmesinde

- > 5 ölçüde bulunur: XS (33,5–37), S (37,5–39,5), M (40–41,5), L (42–44), XL (44,5–47)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.5041

- > use after surgeries to correct hallux valgus, hammer toes, Tailor's bunions and other osteotomies
- > treatment of diabetic ulcerations

- > 5 Sizes: XS (33.5–37), S (37.5–39.5), M (40–41.5), L (42–44), XL (44.5–47)
- > Colour: Black
- > right and left side

> patent protected

OrthoWedge™ light ayakkabı OrthoWedge™'nin değiştirilmiş modelidir.

Hava alan dış materyali, hafif EVA-tabanı ve çıkarılabilir iç tabanı ayakta en iyi konforu sağlar.

The OrthoWedge™ light is the modified version of the OrthoWedge™.

The breathable upper, the light EVA-sole and the removable insole are particular features of the shoe.

HeelWedge™

Topukta yükü azaltan ayakkabı / Off-loading Shoe



Bilimsel araştırma DARCO'dadır /
Study available at DARCO

- > Topuktaki ülserasyonların iyileşmesinde
- > Topuk dikenini (plantar fasitisi)
- > Kırık sonrasında basınç azaltmak için

- > 5 ölçüde bulunur: XS (33,5-37), S (37,5-39,5), M (40-41,5), L (42-44), XL (44,5-47)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ veya sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.5037

- > for the treatment of plantar fasciitis, ulcerations, infections, trauma and following surgery of the soft tissue or bony structure of the heel

- > 5 Sizes: XS (33.5-37), S (37.5-39.5), M (40-41.5), L (42-44), XL (44.5-47)
- > Colour: Black
- > right and left side

> patent protected

HeelWedge™ ayakkabı özellikle topuk bölgesinde basıncı hafifletmek için kullanılır. Kesintisiz tabanı topuğu korur. Tabanın patentli yapısı ve tasarımı basıncı hissedilebilir derecede dağıtır.

İç tabanı sonradan işlenmek (daha fazla basınç azaltmak için) üzere çıkarılabilir.

The HeelWedge™ Shoe is designed to protect the heel by significantly reducing weight-bearing pressure.

With the new developed construction of the outsole there is an absorbing effect. The square form of the sole offers more space for bandage material. The modified closure is available for right or left side. For postprocessing the sole can be taken out. The weight is reduced.

MedicalSurgical™ /- ST

Sargı ayakkabısı / Healing Shoe



İstek üzerine ucunu kapatmak için ekleme sipariş verilebilir /
Toe Cap optional available

Önceki model / Previous Model
Yuvarlak tabana sahip test edilmiş eski model halen mavi renkte temin edilebilir.

The previous model with the rounded sole is still available in the colour blue.

- > Ameliyat sonrası stabilite ve basınç azaltmak için

- > Bayanlar için 3 ölçüde bulunur: S (34-36,5), M (37-38,5), L (39-41)
- > Erkekler için 4 ölçüde bulunur: S (39-41), M (41,5-43), L (43,5-45), XL (45,5-47)
- > Rengi: Siyah
- > ağı veya sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.4026

- > postoperative for stabilising and off-loading

- > 3 Women-Sizes: S (34-36.5), M (37-38.5), L (39-41)
- > 4 Men-Sizes: S (39-41), M (41.5-43), L (43.5-45), XL (45.5-47)
- > Colour: Black
- > right and left side

> patent protected

MedicalSurgical™-ST nerede ameliyat sonrasında stabilite, darbelerden korunma ve basınç azaltılması gerekiyorsa, orada standart bakım haline gelmiştir. Hava geçiren naylon kumaş ve esnek dış yüzeyiyle bu ayakkabı oldukça kalın sargılarda bile kullanılabilir.

Patentle korunan sert taban, ameliyatlı ayağın bükülmesini önler ve en iyi şekilde koruma sağlar. Kadın ve erkek ölçülerine ayrılmış sargı ayakkabısı, her duruma uygundur.

The MedicalSurgical™ Shoe with its famous semi-rigid sole, is built around our patented MetaShank™ forefoot support that provides more rigid control and better protection after osteotomies. Our breathable, mesh upper conforms to bony abnormalities of the foot and has a reinforced heel counter and padded heel collar to stabilize the rear foot and reduce slippage. Extra-long straps accommodate even the bulkiest dressings. Due to the classification in Men- and Women-sizes the shoe fits at best.

Bilimsel araştırma DARCO'dadır / Study available at DARCO

MedicalSurgical™ PED

Çocuklar için sargı ayakkabısı / Pediatric Healing Shoe



> Ameliyat sonrası stabilite ve basınç azaltmak için

> 31 numaraya kadar
> Renkler: Siyah ve mavi
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.4026

> postoperative for stabilising and off-loading

> 1 Size: up to 31
> Colour: Black, Blue
> right and left side

> patent protected

Önceki model / Previous Model
Yuvarlak tabana sahip test edilmiş eski model halen mavi renkte temin edilebilir.

The previous model with the rounded sole is still available in the colour blue.

Çocuk cerrahisi hasta bakımında özel bölümleriyle kendi başına bir alandır. DARCO çocuk ayaklarının ihtiyaçlarına uygundur.

MedicalSurgical™ sargı ayakkabısı, artık çocuk bedenlerinde de bulunur. Çocuk ayakkabıları üretilirken tabii ki ayakkabının test edilmiş yapı tarzından ve kalitesinden vazgeçilmemiştir.

The pediatric surgery is a self-containing field with a wide range of treatment.

The MedicalSurgical™ pediatric is the accommodated version to the adult sizes. The quality and construction characters are the same.

A.P.B.™

Her amaçlı kullanılabilir ayakkabı / All Purpose Boot



> Ameliyat sonrası stabilite ve mobilizasyon için
> Ayağı hareketsiz hale getiren bandajlarda (plastik alçı, cast bandaj)
> Ayağı darbe ve sarsıntılardan korur

> 5 ölçüde bulunur: XS (33,5-37), S (37,5-39,5), M (40-41,5), L (42-44), XL (44,5-47)
> Rengi: Siyah
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> after surgery and for stabilising
> it can also serve as a cast boot for particular applications
> impact-absorbing effect and pressure redistribution

> 5 Sizes: XS (33.5-37), S (37.5-39.5), M (40-41.5), L (42-44), XL (44.5-47)
> Colour: Black
> right and left side

A.P.B.™ ayakkabı MedicalSurgical™-ST ameliyat ayakkabısındaki taban teknolojisiyle hazırlanmıştır. Böylece alçı ayakkabısı veya sabit sargılarda yürüme tabanı olarak da kullanılabilir. Yeniden tasarlanmış açılıp kapanma tekniği ile kolayca giyilebilir ve her iki taraf için uygundur.

Ayakkabı komple kapalıdır ve su geçirmez. Bu da hasta açısından kötü havalarda oldukça avantajlıdır.

In the A.P.B.™ All-Purpose Shoe, the same sole technology is used as in the proven MedicalSurgical™-ST Operations Shoe, so that its use as a plaster shoe or walking sole in rigid bandages is certainly possible. The new closure technique allows for simple and two-sided application.

The shoe is completely closed and water-repellent, which benefits patients exposed to wet weather conditions.

TwinShoe

Balans ayakkabısı / Balance Shoe



> Ayakta yapılan cerrahi bir işlem sonrasında hızlı mobilizasyon için

> WCS™, OrthoWedge™, OrthoWedge™ light ve HeelWedge™ ile eş ayakkabı olarak kullanılabilir

> 5 ölçüde bulunur: XS (33,5-37), S (37,5-39,5), M (40-41,5), L (42-44), XL (44,5-47)

> Rengi: Siyah

> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> for a quick mobilisation after foot surgery

> as matching shoe for the following products: WCS™, OrthoWedge™, OrthoWedge™ light and HeelWedge™

> 5 Sizes: XS (33.5-37), S (37.5-39.5), M (40-41.5), L (42-44), XL (44.5-47)

> Colour: Black

> right and left side

TwinShoe yukarıda belirtilen ürünlerimiz için ve klinik bakımda yardımcı olan dengeleyen eş ayakkabıdır. Kliniğe gitmek yahut hastaya ulaşmak için harcanan pahalı yol masraflarını düşürür. Bu şekilde zahmetli yükseklik dengeleyiciler takılmasına gerek kalmaz.


DARCO TwinShoe fiziki açıdan düzgün yürüyüş sergilenmesini sağlar.

The TwinShoe is a matching and height adjusting shoe supplementing our classic product line listed above and used specifically for clinical care support. Transportation costs for driving to the hospital or to the patient are reduced to a minimum. No more time intensive applying and removing of height adjustments.

DARCO TwinShoe warrants a safe and physiologically correct gait.

PegAssist™ System

Çıkarılabilir ayakkabı tabanı / Off-loading Insoles

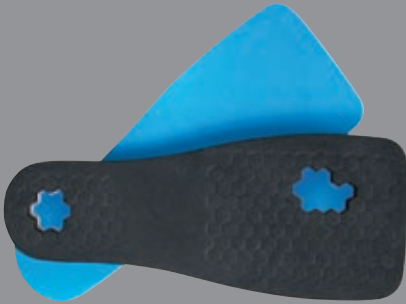

> Akut durumlarda doğrudan basınç azaltmak için

> OrthoWedge™, MedicalSurgical™-ST, HeelWedge™, A.P.B.™, SlimLine™ ve Walker FXPro™ için uygun ölçülerde bulunur

> Sağ ve sol tarafta kullanılabilir

> for selective offloading and acute treatments

> available for the following products in the according sizes: OrthoWedge™, MedicalSurgical™-ST, HeelWedge™, A.P.B.™, SlimLine™ and Walker FXPro™

> right and left side

PegAssist™ taban sistemi doğrudan basınç azaltmak için geliştirilmiştir ve bilhassa akut durumlarda kullanılır.

Petek şekli ile tek tek noktalar halinde oyulabilir. İnce üst tabakası açık bölgeyi sabitleştirir ve kenarların kaymasını önler.

18 mm kalınlığındaki PegInsole™ taban Plastazote®, Poron® ve EVA bileşiminden oluşmaktadır. Bu kombinasyon darbelerden korumak ve şekil verebilmek için en iyi ve en uygun bileşimdir.


The DARCO PegAssist™ System is built around a multi-purpose removable peg insole that effectively off-loads the plantar aspect of the foot.

Easy removing of the single pegs allows a selective offloading and the Peg Support Board keeps the offloaded area intact.

Constructed of an 18 mm combination of Plastazote®, Poron® and multi-foam to provide the perfect combination of shock absorption and moldability.

Puzzle Insole

Modular iç taban / Modular Insole

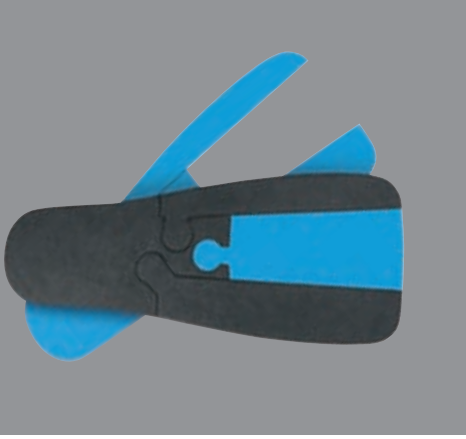

- > Endikasyon amaçlı basınç azaltmak için
- > Darbelerden koruyan etkiye sahiptir
- > OrthoWedge™, MedicalSurgical™-ST, HeelWedge™, SlimLine™ ve Walker FXPro™ için uygun ölçülerde bulunur
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

- > for selective offloading and acute treatments
- > available for the following products in the according sizes: OrthoWedge™, MedicalSurgical™-ST, HeelWedge™, SlimLine™ and Walker FXPro™
- > right and left side

Modular iç taban basıncı plantar dağıtmak için geliştirilmiştir ve ön ayak ve orta ayak ameliyatlarından sonra kullanılır.

Modüllerin kolayca değiştirilebilir olması, hasta açısından endikasyona en uygun basınç dağılımını sağlar. Ön kısımda tekrar %22 basınç azalımı topuk bölgesinde görülür şekilde incelen kama biçimindeki taban sayesinde mümkündür. EVA köpüklü plastikten oluşan siyah ve mavi renklerinde olan tabakalar sadece Shore-sertliğinde farklıdır.

The modular insole was developed for plantar pressure redistribution with specific use after forefoot and midfoot-operations.

By simply replacing the interchangeable modules, the patient can achieve the perfect pressure distribution for each indication. Additional pressure relief of up to 22% in the front is effected by the wedge-shaped sole, that tapers toward the heel. Each puzzle insole system includes a black high-density EVA sole and a blue lower density sole.

TAS™

Halluks valgus ayak parmağı cebiresi / Toe Alignment Splint



- > Halluks valgus ve çekiç parmak ameliyatları sonrası
- > Ölçü: Universal
- > Rengi: Beyaz
- > Sağ ve sol tarafta kullanılabilir
- > Ürün numarası talep edildi

- > postoperative after hallux valgus, hammer toes and Tailor's bunion
- > Size: Universal
- > Colour: White
- > right and left side
- > patent protected

Bilimsel araştırma DARCO' dadır / Study available at DARCO

TAS™ ayak parmağı cebiresi ameliyat sonrasında taping sargı yerine kullanılan, kemikteki hasarların iyileşmesine yardımcı olan bir sargıdır. Ameliyat edilmiş ayak parmağı istenilen pozisyona getirilebilir, bu da ameliyattan alınacak neticeyi büyük ölçüde belirler.

Ayağın arka kısmına yazlık ayakkabı bandı şeklinde değiştirilmiş bant, orta ayak bandajının kaymasını önler. Yumuşak yapısı ve sert plastik materyallerin kullanılmamış olması, rahatça taşınmasını sağlar.

The TAS™ Toe Alignment Splint is an effective and inexpensive way of maintaining correct alignment of the toes during the healing process.

A thin elastic metatarsal band reduces slippage and soft toe straps hold the toes in the correct position to maintain alignment following surgery to correct hallux valgus, hammer toes or Tailor's bunions. May also be used in the treatment of capsulitis plantar to the m.p. joints caused by mild subluxations of the joint.

NightSplint™

Destek cebiresi / Backing Splint



- > Plantar fasitıs kısalmalarında
- > Topuk bölgesinde tendinitde
- > Sivri ayağa karşı önceden korunma
- > Ayağı hareketsiz hale getirmek için

- > 4 ölçüde bulunur: S (35-36), M (37-39), L (40-43), XL (44-49)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 20.06.01.0005

- > plantar fasciitis
- > tendinitis in heel area
- > prophylaxis
- > for immobilization

- > 4 Sizes: S (35-36), M (37-39), L (40-43), XL (44-49)
- > Colour: Black
- > right and left side

> patent protected

NightSplint™ destek cebiresi öncelikle kiriş kısalmalarında ve topuk bölgesinde iltihaplanmalarda ağrı dindirmek amaçlıdır. Ayrıca aşil tendonu yaralanmalarını tedavi etmek için kullanılır. Geniş yapısı sayesinde ayak en uygun pozisyonda sabitleştirilebilir. Sonradan eklenebilir iki ayrı kama dorsifleks pozisyonu mümkün kılar.

The NightSplint™ is designed to alleviate heel pain associated with plantar fasciitis and achilles tendonitis. Non-slip tread on the sole. A large supporting surface cares for enough space an optimal comfort. Two ½ inch EVA insoles are available to further the dorsiflex position of the foot.

BodyArmor® Night Splint

Gece takılan dorsal cebire / Night Splint



- > Plantar fasitıs kısalmalarında
- > Topuk kemiği dikenlerinde ve metatarsaljide
- > Topuk kirişi iltihaplarında ve gevşemelerinde
- > Sivri ayak problemlerinde ve ayak eklemi kontraktürlerinde
- > 1 ölçüde bulunur: Universal
- > Rengi: Beyaz / Mavi
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün numarası talep edildi

- > plantar fasciitis
- > heel spurs and metatarsalgia
- > achilles tendonitis and tendonosis
- > talipes equinus and ankle contracture

- > 1 Size: Universal
- > Colour: White/Blue
- > right and left side

> patent protected

Dorsal gece cebiresi ayağı alt bacağa 90 derece açı ile sabitleştirir. Bu şekilde ayağın sivri ayak durumunda kalması ve topuk kirişlerinin kısalması önlenir. Ayak baş parmağına geçirilen bağ, halluksu kaldırır (dorsalize eder) ve plantar fasitisi uzatır. Fasitisin gerilmesi ve cebirenin duruşundan oluşan kombinasyon bir çok endikasyonlara karşı etki gösterir.

Ayarlanabilir cırtl bantları sayesinde çabucak ve kolayca takılabilir, rahatça taşınabilir.

The dorsal Night Splint stabilizes the foot and lower leg position at an angle of 90° in order to avoid equines deformity of the foot and to consequently prevent achilles tendon shortening. The toe loop elevates the hallux (dorsal flexion) resulting in a sustained stretch to the plantar fascia. The combination of stretching to the fascia and keeping the position by means of the splint enables various indications to counteract.

The adjustable straps are quick and easy to use providing perfect fitting.



**Travma bakımı / Trauma Care
Sportsline**

BodyArmor® CastShoe™

Alçı ayakkabısı / Cast Boot



- > Alçılı ayakta yürüme ayakkabısı olarak kullanılır
- > 5 ölçüde bulunur: XS (bis 35,5), S (36-39), M (39,5-42), L (42,5-45), XL (45,5-48,5)
- > Rengi: Koyu gri
- > Sağ ve sol ayak içindir

> usable as a walking shoe over a cast bandage

- > 5 Sizes: XS (24 cm), S (26.5 cm), M (29.5 cm), L (31 cm), XL (34.5 cm)
- > Colour: Dark Grey
- > right and left side

> patent protected

BodyArmor® CastShoe™ alçının konforla taşınmasında yardımcı olur ve alçıyı korur. TPR® maddesinden oluşan bu çok hafif ayakkabı, alçıya kolay bir şekilde uydurulabilir. Patentli açma ve kapama sistemi ayağa en iyi şekilde destek verir. Sağlam alt tabanı fizyolojik açıdan düzgün bir yürüyüş sergilemenizi sağlar. CastShoe™ açık alanda kullanıma çok uygundur.

The new BodyArmor® CastShoe™ provides the ultimate cast protection in a new modern design that will appeal to all patients. Soft, durable TPR® is combined with a patent protected unique bungee closure system to seat and secure the cast in the shoe, all the while providing the comfort patients need and deserve.

SlimLine™

Uzun süreli sargı ayakkabısı / Cast Boot



- > Plastik alçı sargılarında ve tutya merhemine batırılmış sargı bezleri için uygundur
- > Darbelerden korur

- > 5 ölçüde bulunur: XS (33,5-37), S (37,5-39,5), M (40-41,5), L (42-44), XL (44,5-47)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 31.03.03.4025

> used over a fiberglass cast or a zinc bandage

> shock absorbing effect

- > 5 Sizes: XS (33.5-37), S (37.5-39.5), M (40-41.5), L (42-44), XL (44.5-47)
- > Colour: Schwarz
- > right and left side

> patent protected

SlimLine™ ayakkabı DARCO SlimLine™ isimli ayakkabıdan sonra gelen modeldir. Ön ayak bölümünün kare şeklinde olması ve değiştirilmiş kopça tekniği sayesinde daha da kalın sargılarda kullanılabilir. İç taban işlenmek (basıncı daha fazla azaltmak amaçlı) için çıkarılabilir.

Ayakkabı yüzeyi esnek ve havanın etkilerine karşı dayanıklı olan siyah naylondan yapılmıştır. Özel tasarlanmış yürüme tabanı fizyolojik açıdan düzgün bir yürüyüş sağlar.

The SlimLine™ is the modified version of the proven SlimLine™ Cast Boot. With the new developed construction of the outsole there is a shock absorbing effect. The square form of the sole offers more space for bandage material. The modified closure is available for right or left side. For postprocessing the sole can be taken out.

The upper is Nylon and the special sole warrants a physiological correct walking.

SlimLine™ PED

Çocuk alçı ayakkabısı / Pediatric Cast Boot



> Plastik alçı sargılarında ve tutya merhemine batırılmış sargı bezleri için uygundur

> 3 ölçüde bulunur:
S (bis 22), M (22,5 – 26), L (26,5 – 31)
> Rengi: Mavi ve pembe
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> used over a fiberglass cast or a zinc bandage

> 3 Sizes:
S (up to 22), M (22,5 – 26), L (26,5 – 31)
> Colours: Blue, Pink
> right and left side

> patent protected

Özellikle çocuklara yapılan alçı yoğun şekilde aşınmaya ve darbelere maruz kalır. Alçı üzerine giyilen SlimLine™ PED ayakkabı, alçıyı çabuk aşınmadan ve kirden korumak için ideal çözümdür.

Tabii ki büyükler için üretilmiş modelimizin özellikleri bu ayakkabıda da mevcuttur.

Particular the children cast is exposed of high loading and strain. The SlimLine™ cast boot pediatric is ideal to safe the cast against fading and smut.

All features from the adult sizes are in this product included.

BodyArmor® Walker II

Alt bacakta alçıyı çıkardıktan sonra kullanılan ayakkabı / Cast Replacement

Bilimsel araştırma DARCO' dadır / Study available at DARCO



ATW™ (Aşil tendonu kaması)
Aşil tendonu ruptüründe topuk bölgesine üç adet yükseltici ayağa uygun şekilde üst üste konular ve topuk bölgesinde walker ile sabitleştirilir. Bu şekilde ameliyatlı aşil tendonu bölgesinde basınç dindirilir ve ameliyat bölgesinin iyileşmesi kolaylaştırılır.

In conformity of the foot sizes, three wedges will be placed one upon the other and fixed inside the Walker. You will get a off-loading position for the Achilles tendon.

> Alt bacakta alçı yerine kullanılır
> Darbelere korur

> 5 ölçüde bulunur: XS (bis 34), S (35–38), M (39–42), L (43–46), XL (47–49)
> Rengi: Siyah
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir
> Yarım konçlu temin edilebilir

> Ürün numarası talep edildi

> total contact system instead of a cast

> 5 Sizes: XS (up to 34), S (35–38), M (39–42), L (43–46), XL (47–49)
> Colour: Black
> right and left side
> in high and low version available

> patent protected

BodyArmor® Walker II esnek poliüretan kelepçeleri sayesinde ayağı veya ayak eklem kemiğini sağlamlaştırır ve korur. Kaldıraç etkisi olan kelepçeler, doğrudan ayakkabının dışına tutturulmuştur. Bu şekilde oluşan basınçlı kelepçe, yükü eşit olarak dağıtır. Ödem oluşumu önlenir ve istenilen immobilize sağlanır. İki tabakadan oluşan iç taban, ayak topuğunda basınç azaltacak bölgeler oluşturur. Aynı bir sağlam tabaka ayağı topuk bölgesinde korur.

With the hard shell circumferential protection, the BodyArmor® Walker II can be used like a cast. Leverage fastener similar to ski boot buckles are attached directly at the shell and controls compression and immobilisation. Two insoles can be taken out for further rework and off-loading. An additional stabilization plate at the heel saves the foot much more in this area.

Walker FXPro™

Stabilize ortezi / Stabilising Orthosis



> Ayak eklem kemiği burkulmalarında ve bağ ruptürlerinde

> 5 ölçüde bulunur: XS (bis 36), S (37-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-46)

> Rengi: Siyah

> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün numarası talep edildi

> for ruptures and ankle injuries

> 5 Sizes: XS (up to 36), S (37-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-46)

> Colour: Black

> right and left side

> patent protected

Walker FXPro™ ayak eklem kemiğini stabilize etmek içindir. Mediyal ve lateral yapılmış iki cebire, ayağın sağlam bir şekilde durmasını sağlar ve yana doğru bükülmesini önler. Cebireler alt ayak bölümüne uydurulduktan sonra sürtünme azalır. Hava alan iç ayakkabı, yeterli hava sirkülasyonuna neden olur ve aşırı sıcaktan korur. Sirküler cırtlı bantlar hastaya göre ayarlanabilir.

The Walker FXPro™ is built around an ultra low-profile sole that provides the smoothest possible transition from heel to toe for normal ambulation without stressing the foot and ankle. Spatula stirrups conform to the calf to reduce chafing and the vented liner ensures that your patients stay cooler and dryer.

Circular Velcro® straps warrants best fit in the leg and are individual adjustable. The rocker sole warrants a physiological correct gait.

AirTraveler™ Walker

Stabilize ortezi / Stabilising Orthosis



> Ayak eklem kemiği burkulmalarında ve bağ ruptürlerinde

> 5 ölçüde bulunur: XS (bis 36), S (37-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-46)

> Rengi: Dışı siyah, iç ayakkabısı mavi

> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Uzun ve kısa konçlu temin edilebilir

> for ruptures and ankle injuries

> 5 Sizes: XS (up to 36), S (37-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-46)

> Colour: Black with an blue liner

> right and left side

> in high and low version available

> patent protected

AirTraveler™ Walker yapısı ve tasarımı açısından DARCO Walker FXPro™ ile aynıdır. Fakat ayarlanabilir hava basınçları bu yardımcı aleti tamamlar ve ek bir kompresyon sağlar.

Test edilmiş alt tabanı ve hafifliği sayesinde rahat ve konforludur.

The AirTraveler™ is an economical, pneumatic walker. In comparison with the Walker FXPro™, the AirTraveler™ Walker ensures more compression with the circumferential air bladders.

Posterior flow restrictor channels forward the air for the greatest immobilizing effect.

ActiveAnkle® T2

Ayak eklem kemiği bandajı / Ankle Brace



Bilimsel araştırma DARCO'dadır /
Study available at DARCO

- > Hem önlem amaçlı hem de rehabilitasyon için
- > Anatomik düzgün şekil

- > 3 ölçüde bulunur:
S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Rengi: Siyah, beyaz
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 05.02.03.0056

- > for prevention and rehabilitation
- > fits anatomical correct

- > 3 Sizes:
S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Colours: Black, White
- > right and left side

> patent protected

ActiveAnkle® T2 rahat ve stabil destek sağlar ve eklem kemiğini maksimal derecede korur.

Ayak eklem kemiği bandajı şekli bozulmayan, oldukça koruyan eklemleri polietilenden hazırlanmıştır. Kolayca ayarlanan topuk bandı cebireyi ayrıca sağlamlaştırır. Ayağa uydurulmuş ve çıkarılabilir EVA-taban, ayrı bir konfor sağlar. Yüksekliği ayarlanabilir cırtlı kemeri sayesinde ayağa tam olarak uydurulabilir.

The ActiveAnkle® brace stands for best stabilising of the ankle. The solid PE-shell relieves pressure from the ankle joint and provides protection. Custom molded EVA padding system for fit and comfort. The durable single strap fastening system warrants an optimal fitting and is high-adjustable. Anatomically correct hinge allows for normal gait activities.

ActiveAnkle® Multi-Phase™

Ayak eklem kemiği bandajı / Ankle Brace



- > Akut yaralanma döneminden rehabilitasyona kadar
- > Günlük aktivitelere uygun

- > 4 ölçüde bulunur: XS (35 – 37), S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Rengi: Siyah
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

- > for longtime injuries during the acute phase and rehabilitation process

- > 4 Sizes: XS (35 – 37), S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Colours: Black
- > right and left side

> patent protected

ActiveAnkle® Multi-Phase™ çok uzun taşıma zamanlarında da kullanılabilir.

Tabanın sonradan kesilerek ayarlanması, bandajın akut yaralanmadan sonra uzun bir süre kullanılmasını sağlar. İki cırtlı bant sayesinde rahat, yumuşak ve aynı zamanda emniyetlidir.

The new ActiveAnkle® Multi-Phase™ is two devices in one. It is the first orthosis, that can take patients from the acute phase of injury all the way through the rehabilitation process and back to everyday activities. The dual density padding system with memory foam is easily modified to be more comfortable when normal daily activities resume. Anatomically correct hinge allows for normal gait activities.

ActiveAnkle® Chameleon Brace™

Ayak eklem kemiği bandajı / Ankle Brace



- > Önlem amaçlı, akut yaralanma döneminden rehabilitasyona kadar
- > Günlük aktivitelere uygun
- > 3 ölçüde bulunur: S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Rengi: Siyah, beyaz
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> for prevention, for longtime injuries during the acute phase and rehabilitation process

- > 3 Sizes: S (38 – 41), M (42 – 44), L (45 – 48)
- > Colours: Black, White
- > incl. 9 interchangeable strap covers
- > right and left side

> patent protected

Chameleon Brace™ isimli ürünümüz ActiveAnkle® eklem kemiği bandajının tüm test edilmiş özelliklerini taşımaktadır. T2 modeli ve Multi-Phase™ kombinasyonu prevensiyon alanında en iyi bakımı sunmaktadır. Sekiz ayrı renkte takılabilen klipsler Chameleon Brace™ modelini tamamlar.

The proven design of the Chameleon Brace™ provides a comfortable combination of convenience and strength, and is recommended for anyone seeking to prevent ankle injury.

The Chameleon Brace™ adds a new idea to ankle protection: STYLE. Now, athletes in virtually every sport can add a bright accent colour to their basic white or black braces.

SpiderBrace™

Ayak eklem kemiği bandajı / Ankle Brace



- > Prevensiyon amaçlı ve eklem kemiği yaralanmalarında destek olarak
- > 5 ölçüde bulunur: XS (36 – 38,5), S (39 – 41), M (42 – 45), L (45,5 – 47,5), XL (48 – 50)
- > Rengi: Siyah

> for prevention and support of ankle injuries

- > 5 Sizes: XS (36 – 38,5), S (39 – 41), M (42 – 45), L (45,5 – 47,5), XL (48 – 50)
- > Colour: Black

> patent protected

Bilimsel araştırma DARCO'dadır / Study available at DARCO

SpiderBrace™ ayak eklem kemiği bölgesindeki kirişleri ve kasların sağlamlaştırmak için bir spor bandajıdır. İnce vinli materyal, bandajın hem spor ayakkabısı hem de sokak ayakkabıları ile kullanılmasını sağlar.

Geniş ağzı sayesinde kolayca giyilir. Yeni geliştirilmiş açma ve kapatma sistemi ile sıkı tutar.

The SpiderBrace™ is constructed of a durable vinyl shell lined with high tech spacer padding to help wick off moisture for comfort. Easy to get in and thin enough to wear with athletic shoes or casual dress shoes.

DARCO Standard Tape

Elastik olmayan teyp / Non-elastic Tape Bandage



- > Eklemleri ve kasların stabilizesi için
- > Bandaja alternatif
- > 1 ölçüde bulunur: 3,8 cm × 10 m
- > Rengi: Beyaz

- > for stabilization of joints and muscles
- > an alternative to bandages
- > 1 Size: 3.8 cm × 10 m
- > Colour: White

DARCO Standard Tape esnek olmayan teyp bandajdır. Eklemleri ve kasları stabilize etmek için kullanılır.

Bu teyp tüm dünyada bilinmektedir. Özellikle spor alanında bandaj yerine iyi bir alternatif olmaktadır, çünkü taşıyanın spor dalı, yaralanma riski ve fizyonomi gibi durumuna göre ayarlanabilir.

The DARCO Standard Tape is a non-elastic tape used to stabilize joints and muscles.

Use of this tape is known the world over. In sports-related applications in particular, it provides an excellent alternative to bandages, since it lends itself to individual adaptation to the situation, i.e. to the sport and the level of risk of injury involved as well as to the physiognomy of the wearer.

DARCO Underwrap

Kohezyon iç bandaj / Cohesive Underwrap



- > Cilde zarar vermeyen iç bandaj
- > Koruyucu astar
- > Alçıların ve bandajların sabitleştirilmesinde

- > skin-friendly
- > protective cover
- > fixation of plasters and bandages

- > 3 ölçüde bulunur:
 - 6 cm × 4 m
 - 8 cm × 4 m
 - 8 cm × 20 m
- > Rengi: Bej

- > 3 Sizes:
 - 6 cm × 4 m
 - 8 cm × 4 m
 - 8 cm × 20 m
- > Colour: Beige

DARCO iç bandaj boyuna doğru esnek olan, çok ince dokunmuş ve kendiliğinden yapışan özelliğe sahip bir sargı bezidir. Bu iç bandaj öncelikle hafif kompresyon tedavisi uygular ve aynı zamanda cildi korumak için kullanılır. Bunların dışında buz veya soğutucu vs. gibi tedaviyi destekleyen yardımcıları sabitleştirmek için çok uygundur. Hava geçiren dokusu %60 polyamid ve %40 pamuktan oluşur. Bu bileşim yüksek konforla taşınmasını sağlar.

DARCO Underwrap is a lengthwise elastic and very thin woven adhesive bandage. This underwrap is primarily used for compression treatment as well as for preventive skin protection. Moreover, it is meant for fixing treatment supporting aids such as ice for cooling. The underwrap is made of 60% polyamide and 40% cotton breatheably interwoven for a specifically comfortable fit. The material contains natural rubber latex.

DARCO Elastic Tape

Kinesiyoloji için sportik teyp / Elastic Tape Bandage for Kinesiology



- > Kaslarla ilgili şikayetlere karşı
- > Sürekli uyarımla güçlenmek için
- > Kan dolaşımını desteklemek amaçlı
- > Esnek ve % 30'a kadar açılır

- > 1 ölçüde bulunur: 5 cm x 5 m
- > Rengi: mavi, kırmızı

- > for treatment of muscular symptoms
- > to improve performance by means of continuous stimulation
- > stimulates the circulation
- > elastic and stretchable up to 30 %

- > 1 Size: 5 cm x 5 m
- > Colours: Blue, Red

DARCO Elastic Tape hareket biliminde kullanmak üzere esnek spor ve terapi bandajıdır. Bu teknik tüm dünyada çeşitli spor dallarında, aynı fizyoterapi gören hastalarda olduğu gibi, başarıyla kullanılır.

Teyp kas, bağlar yahut kirış ile ilgili şikayetlerde veya uyarıcı organları devamlı uyararak güç artırmak amaçlı kullanılır. Sargılı bölgede daha iyi kan dolaşımı dolayısıyla doğal iyileşme desteklenir.

The DARCO Elastic Tape is an elastic sport and therapy tape for use in applied kinesiology. This technique is used worldwide in many sporting fields as successfully as with patients in a physiotherapeutic setting.

The tape is used in treatment of muscle, fascia and tendon symptoms and for performance enhancement by way of continuous receptor stimulation. The natural healing process is enhanced due to improved circulation in the taped areas.

DARCO Tape-Kit

Temel donanım / Basic Supply



- > 5 adet DARCO Standard Tape
- > Ölçü: 3,8 cm x 10 m

- > 1 adet DARCO Elastic Tape mavi
- > 1 adet DARCO Elastic Tape kırmızı
- > Ölçüleri: 5 cm x 5 m

- > 5 x DARCO Standard Tape
- > Size: 3.8 cm x 10 m

- > 1 x DARCO Elastic Tape Blue
- > 1 x DARCO Elastic Tape Red
- > Size: 5 cm x 5 m

DARCO Tape-Kit baş stabilizasyondan mobilizasyon dönemine kadar temel donanımdır. DARCO Elastic Tape ve DARCO Standard Tape'den oluşmaktadır.

The DARCO Tape-Kit contains a basic supply of tapes for practices for use in initial stabilization up to the mobilization phase. It includes our DARCO Elastic Tape and DARCO Standard Tape.

Heelift® Traction Boot

Topuk çizmesi / Off-loading Boot



- > Ameliyat sonrası ekstansiyon
- > Postoperatif ve prevensiyon

- > Ölçüleri: Universal
- > Rengi: Bej
- > Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

- > for extension preoperative
- > postoperative and for prevention

- > Size: Universal
- > Colour: Beige
- > right and left side



Heelift® Traction Boot uyluk fraktürlerinde ekstansiyon sargısı gibi kullanılır. Eğer hasta ameliyat öncesi bacağı kontrol edemiyorsa, bacak kaldırılır ve en uygun pozisyona getirilir. Kırık ağrılarını dindirmek için 4,5 kiloya kadar çekici kuvvet uygulanabilir. Ameliyat sonrasında germe takımları çıkarılabilir ve standard ve smooth versiyonları gibi kullanılabilir.

The Heelift® Traction Boot provides an inventive method of applying skin traction to help stabilize femur fractures prior to surgery. With up to ten pounds straight skin traction for fracture pain relief, Heelift® Traction Boot helps preventing the heel. During the pre-surgical period when the patient lacks the ability to control the leg, Heelift® Traction Boot elevates the leg and controls foot drop and rotation. For post-operative use, the straps can be removed and the boot is convert to a Standard- or Smooth-Version.



Diyabet bakımı / Diabetic Care

Heelift® Suspension Boot

Topuk çizmesi / Off-loading Boot



> Dekübit ve diyabetik ayaklarda açık yaraların iyileşmesinde ve prevensiyon için

> Ölçü: Küçük, normal
> Rengi: Bej
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 11.11.05.0002

> for prevention and healing of open wounds and decubitus

> Sizes: Petite, Normal
> Colour: Beige
> right and left side

> patent protected

Heelift® topuk çizmesi ile özellikle yatalak hastalarda topuk bölgesinde etkin şekilde basınç azaltılır.

Özel köpüklü plastik yapısı daha iyi hava sirkülasyonu sağlar. İç tarafındaki düğümler sayesinde serinlik artar.

Yüzü 60 derecede yıkanabilir, ancak yıkar-ken birlikte gönderilen çamaşır torbasının kullanılması önerilir. Bu şekilde şekil kaybı olmaz.

The Heelift® Suspension Boot is for non-edematous legs or patients who prefer a slightly cooler boot, choose original Heelift. Made from soft, firm, medical grade foam with a convoluted design, original Heelift effectively removes pressure from the heel, preventing heel sores, pressure ulcers and diabetic foot ulcers from forming.

Original Heelift® is machine washable if placed in a net laundry bag with the Velcro® straps closed and the extra elevation pad removed.

Heelift® Smooth Boot

Topuk çizmesi / Off-loading Boot



> Dekübit ve diyabetik ayaklarda açık yaraların iyileşmesi ve prevensiyon için

> Ölçü: Küçük, normal, büyük
> Rengi: Bej
> Sağ ve sol ayakta kullanılabilir

> Ürün no. 11.11.05.0003

> for prevention and healing of open wounds and decubitus

> 3 Sizes: Petite, Normal, Bariatric
> Colour: Beige
> right and left side

> patent protected

Heelift® topuk çizmesi özellikle hassas cilde sahip hastalar için geliştirilmiştir. Bu şekilde ödem oluşumu önlenir. Bu versiyon diyabet hastalarına önerilir.

Yüzü 60 derecede yıkanabilir, ancak yıkar-ken birlikte gönderilen çamaşır torbasının kullanılması önerilir. Bu şekilde şeklini kaybetmez.

The Heelift® Smooth Boot is the soft version of the heel system. Made from soft, firm, medical grade foam with a smooth surface. The Smooth Boot is recommended especially for diabetic patients.

Uzun süreli sargı ayakkabısı / Wound Care Shoe System



WCS™ Taban astarı / Insoles
Tedavinin devamı için ve lezyonlarda herhangi bir değişiklik olduğunda 4 tabakadan oluşan taban sistemi ayrıca sipariş verilebilir.

For further treatment and if lesions are changing, the four layers can be ordered separately.

> Diyabet hastaları için ameliyat sonrasında stabilite, darbelerden koruma ve basınç azaltma için

> 7 ölçüde bulunur: XS (bis 36), S (37-38), S/M (39-40), M (41-42), L (43-44), XL (45-46), XXL (47-48)
> Rengi: Siyah

> Ürün no. 31.03.03.4023

> postoperative for diabetic patients
> for off-loading of ulcerations and wounds

> 7 Sizes: XS (up to 36), S (37-38), S/M (39-40), M (41-42), L (43-44), XL (45-46), XXL (47-48)
> Colour: Black

> patent protected

WCS™ zahmetsiz bir şekilde her hastaya hafifletme amaçlı uygulanabilir. Yapısı sayesinde ve dört tabakadan oluşan iç tabanı elle işlendikten sonra tekrar plantar, mediyal ve lateral basınç düşürülür. Yapısı, geniş açma imkanı ve ayarlanabilir cırtlı kemerler, kalın sargılara rağmen giyilebilmesini sağlar. Yuvarlak altı sayesinde düzgün bir yürüyüş sergilenebilir. Böylece ayakkabı dışarıda da giyilebilir.

The WCS™ Wound Care Shoe System is recommended for the treatment of open and closed ulcerations and other conditions of the foot in which it is desirable to redistribute weight away from specific areas. The circumferential counter of the shoe forms a deep pocket in the sole to permit the use of a variety of insoles under the ulceration or area of pressure. The insole material is placed below the level of the top of the circumferential counter, providing greater stability for the foot by preventing the layered insoles from shifting within the shoe.

Bilimsel araştırma DARCO' dadır / Study available at DARCO

Elbowlift®

Dirseklik / Elbowprotection



> Prevensiyon ve basınç azaltma amaçlı

> Ölçü: Üniversal
> Rengi: Bej
> Sağ ve sol tarafta kullanılabilir

> for prevention and off-loading

> Size: Üniversal
> Colour: Beige
> right and left side




Elbowlift® dirseklik dirseğin hassas ucunu sürtünmelerden ve incinmelerden korur. Elbowlift® cırtlı bandı sayesinde kolaylıkla takılabilir ve bu şekilde hassas dirsek bölgesinde ezikler, yaralar ve diğer cilt yaralanmaları önlenir.

Yumuşak içi ve ortasındaki boşluk konforla taşınmasını sağlar.

The Elbowlift® Suspension Pad protects the sensitive olecranon and olecranon bursa from friction burns and contusions by elevating and cushioning the elbow in smooth foam. Elbowlift® prevents pressure ulcers, pressure sores and other skin injuries. Smooth, low friction backing improves patient movement. Center hole allows for patient best comfort.

Ölçü tabelası / Sizes


OrthoWedge™ / light, HeelWedge™, SlimLine™, A.P.B.™

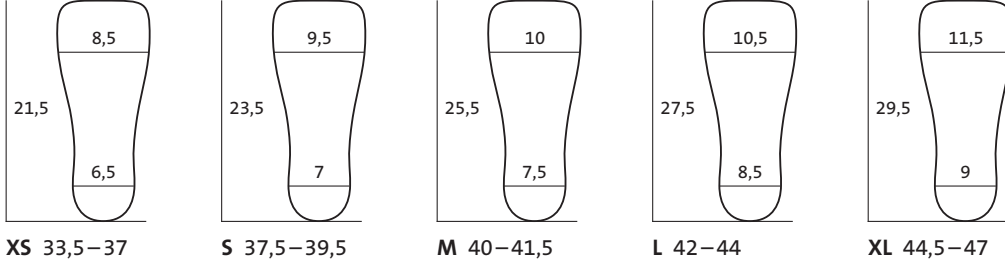


Tüm ölçüler cm olarak belirtilmiştir ve iç tabanın ölçüsüne uygundur.

All dimensions are shown in cm and relates to the insoles.


MedicalSurgical™ – ST, MedicalSurgical™ Önceki model / Previous Model

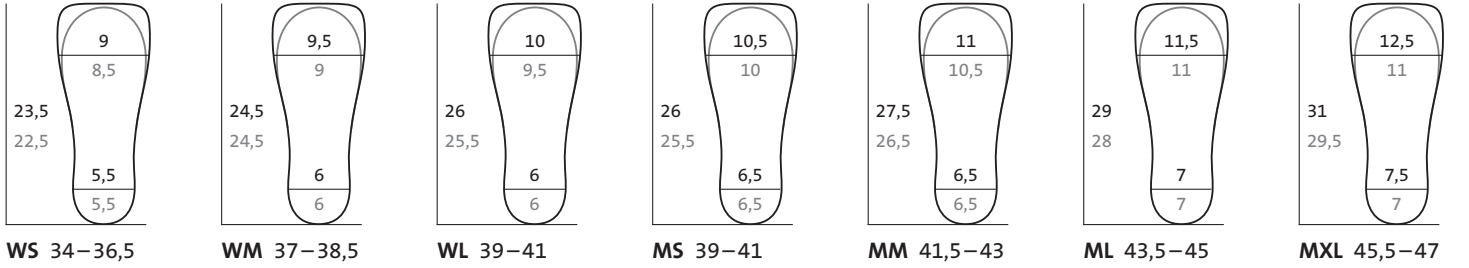


Walker FXPro™, AirTraveler™ Walker

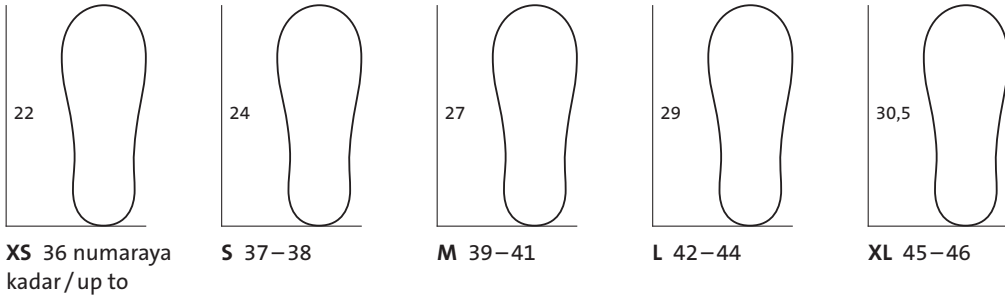

BodyArmor® Walker II

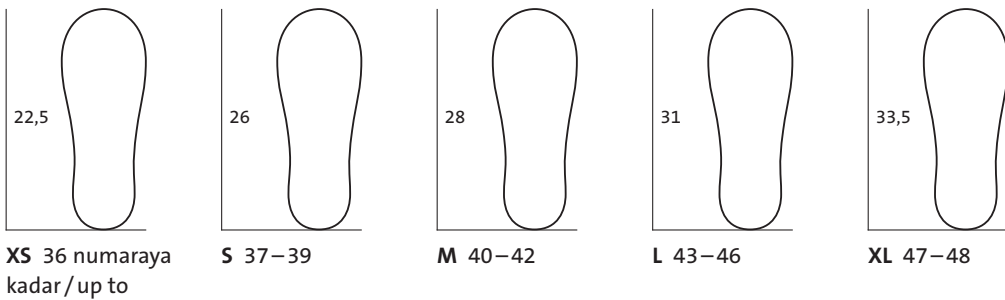

WCS™

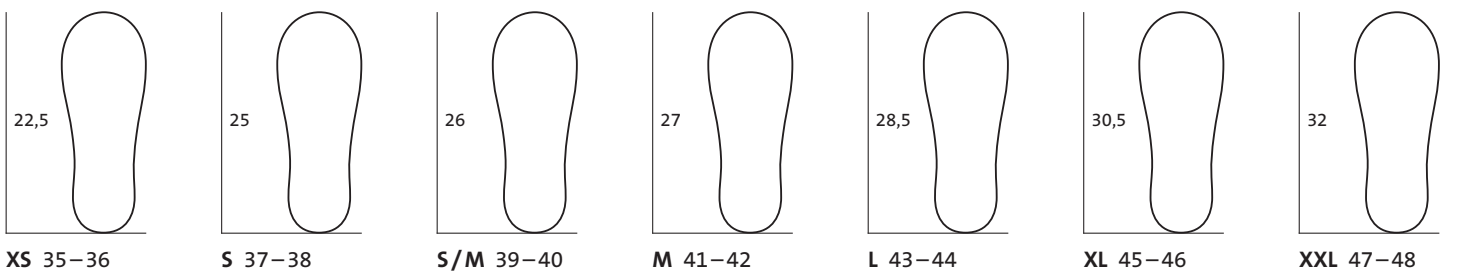

Ürün listesi / Article List

Ürün no./Item-No. Renk/Colour Numara/Size (EU)

Ameliyat sonrası bakım / Postoperative Care

OrthoWedge™

OW0B-ST	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
OW1B-ST	Siyah / Black	S	37,5–39,5
OW2B-ST	Siyah / Black	M	40,0–41,5
OW3B-ST	Siyah / Black	L	42,0–44,0
OW4B-ST	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

+ Ayak başlığı / Toe Cap (için / for OrthoWedge™)

TCO0	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
TCO1	Siyah / Black	S	37,5–39,5
TCO2	Siyah / Black	M	40,0–41,5
TCO3	Siyah / Black	L	42,0–44,0
TCO4	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

OrthoWedge™ light

OW0B-STL	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
OW1B-STL	Siyah / Black	S	37,5–39,5
OW2B-STL	Siyah / Black	M	40,0–41,5
OW3B-STL	Siyah / Black	L	42,0–44,0
OW4B-STL	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

HeelWedge™

HW0B-ST	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
HW1B-ST	Siyah / Black	S	37,5–39,5
HW2B-ST	Siyah / Black	M	40,0–41,5
HW3B-ST	Siyah / Black	L	42,0–44,0
HW4B-ST	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

MedicalSurgical™ – ST

Bayanlar için / Women:

MSW1B-ST	Siyah / Black	WS	34,0–36,5
MSW2B-ST	Siyah / Black	WM	37,0–38,5
MSW3B-ST	Siyah / Black	WL	39,0–41,0

Erkekler için / Men:

MSM1B-ST	Siyah / Black	MS	39,0–41,0
MSM2B-ST	Siyah / Black	MM	41,5–43,0
MSM3B-ST	Siyah / Black	ML	43,5–45,0
MSM4B-ST	Siyah / Black	MXL	45,5–47,0

+ Ayak başlığı / Toe Cap (için / for MedicalSurgical™ – ST)

TCW1	Siyah / Black	WS	34,0–36,5
TCW2	Siyah / Black	WM	37,0–38,5
TCW3	Siyah / Black	WL	39,0–41,0
TCM1	Siyah / Black	MS	39,0–41,0
TCM2	Siyah / Black	MM	41,5–43,0
TCM3	Siyah / Black	ML	43,5–45,0
TCM4	Siyah / Black	MXL	45,0–48,0

MedicalSurgical™ Önceki model / Previous Model

Bayanlar için / Women:

MSW1	Mavi / Blue	WS	34,0–36,5
MSW2	Mavi / Blue	WM	37,0–38,5
MSW3	Mavi / Blue	WL	39,0–41,0

Erkekler için / Men:

MSM1	Mavi / Blue	MS	39,0–41,0
MSM2	Mavi / Blue	MM	41,5–43,0
MSM3	Mavi / Blue	ML	43,5–45,0
MSM4	Mavi / Blue	MXL	45,0–48,0

MedicalSurgical™ Pediatric

MSPED-ST	Siyah / Black	1 Size	31,0' e kadar / up to
MSPED	Mavi / Blue	1 Size	31,0' e kadar / up to

A.P.B.™

APB0B-ST	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
APB1B-ST	Siyah / Black	S	37,5–39,5
APB2B-ST	Siyah / Black	M	40,0–41,5
APB3B-ST	Siyah / Black	L	42,0–44,0
APB4B-ST	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

TwinShoe

TS0B	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
TS1B	Siyah / Black	S	37,5–39,5
TS2B	Siyah / Black	M	40,0–41,5
TS3B	Siyah / Black	L	42,0–44,0
TS4B	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

PegAssist™ System (için / for MedicalSurgical™ – ST)

Bayanlar için / Women:

PAS-W1	WS	34,0–36,5
PAS-W2	WM	37,0–38,5
PAS-W3	WL	39,0–41,0

Erkekler için / Men:

PAS-M1	MS	39,0–41,0
PAS-M2	MM	41,5–43,0
PAS-M3	ML	43,5–45,0
PAS-M4	MXL	45,0–48,0

PegAssist™ System (için / for OrthoWedge™, HeelWedge™, SlimLine™ ve / and Walker FXPro™)

PAS-0	XS	33,5–37,0
PAS-1	S	37,5–39,5
PAS-2	M	40,0–41,5
PAS-3	L	42,0–44,0
PAS-4	XL	44,5–47,0

Puzzle Insole için / for MedicalSurgical™ –ST

Bayanlar için:

PI-WS	WS	34,0–36,5
PI-WM	WM	37,0–38,5
PI-WL	WL	39,0–41,0

Erkekler için:

PI-MS	MS	38,0–41,0
PI-MM	MM	41,5–43,0
PI-ML	ML	43,5–45,0
PI-MXL	MXL	45,5–47,0

Puzzle Insole için / for OrthoWedge™, HeelWedge™, SlimLine™ ve / and Walker FXPro™

PI-0	XS	33,5–37,0
PI-1	S	37,5–39,5
PI-2	M	40,0–41,5
PI-3	L	42,0–44,0
PI-4	XL	45,5–47,0

TAS™

TAS	Beyaz / White	Universal
-----	---------------	-----------

NightSplint™

NS1B	Siyah / Black	S	35,0–36,0
NS2B	Siyah / Black	M	37,0–39,0
NS3B	Siyah / Black	L	40,0–43,0
NS4B	Siyah / Black	XL	44,0–49,0

BodyArmor® Night Splint

BADS	Beyaz / Mavi White / Blue	Universal
------	------------------------------	-----------

Travma bakımı / Trauma Care Sportsline

BodyArmor® CastShoe™

CS0	Koyu gri / Dark Grey	XS	24,0 cm
CS1	Koyu gri / Dark Grey	S	26,5 cm
CS2	Koyu gri / Dark Grey	M	29,5 cm
CS3	Koyu gri / Dark Grey	L	31,0 cm
CS4	Koyu gri / Dark Grey	XL	34,5 cm

SlimLine™

SLO0B-ST	Siyah / Black	XS	33,5–37,0
SLO1B-ST	Siyah / Black	S	37,5–39,5
SLO2B-ST	Siyah / Black	M	40,0–41,5
SLO3B-ST	Siyah / Black	L	42,0–44,0
SLO4B-ST	Siyah / Black	XL	44,5–47,0

SlimLine™ Pediatric

SLPED1N	Mavi / Blue	S	22,0'e kadar / up to
SLPED2N	Mavi / Blue	M	22,5–26
SLPED3N	Mavi / Blue	L	26,5–31
SLPED1P	Pembe / Pink	S	22,0'e kadar / up to
SLPED2P	Pembe / Pink	M	22,5–26
SLPED3P	Pembe / Pink	L	26,5–31

BodyArmor® Walker II

BAT0	Siyah / Black	XS	34,0'e kadar / up to
BAT1	Siyah / Black	S	35,0–38,0
BAT2	Siyah / Black	M	39,0–42,0
BAT3	Siyah / Black	L	43,0–46,0
BAT4	Siyah / Black	XL	47,0–49,0

+ ATW™ (için / for BodyArmor® Walker II)

Sol / left:

ATW1-L	Beyaz / White	XS, S, M
ATW2-L	Beyaz / White	L, XL

Sağ / right:

ATW1-R	Beyaz / White	XS, S, M
ATW2-R	Beyaz / White	L, XL

Walker FXPro™

FX0	Siyah / Black	XS	36,0'e kadar / up to
FX1	Siyah / Black	S	37,0–38,0
FX2	Siyah / Black	M	39,0–41,0
FX3	Siyah / Black	L	42,0–44,0
FX4	Siyah / Black	XL	45,0–46,0



Ürün no./Item-No. Renk/Colour Numara/Size (EU)

AirTraveler™ Walker

Uzun konç / high version:

AT0	Siyah / Black	XS	36,0'e kadar / up to
AT1	Siyah / Black	S	37,0–38,0
AT2	Siyah / Black	M	39,0–41,0
AT3	Siyah / Black	L	42,0–44,0
AT4	Siyah / Black	XL	45,0–46,0

Kısa konç / low version:

ATS0	Siyah / Black	XS	36,0'e kadar / up to
ATS1	Siyah / Black	S	37,0–38,0
ATS2	Siyah / Black	M	39,0–41,0
ATS3	Siyah / Black	L	42,0–44,0
ATS4	Siyah / Black	XL	45,0–46,0

ActiveAnkle® T2

AAT2-1B	Siyah / Black	S	38,0–41,0
AAT2-2B	Siyah / Black	M	42,0–44,0
AAT2-3B	Siyah / Black	L	45,0–48,0

AAT2-1W	Beyaz / White	S	38,0–41,0
AAT2-2W	Beyaz / White	M	42,0–44,0
AAT2-3W	Beyaz / White	L	45,0–48,0

ActiveAnkle® Multi-Phase™

AAM-0B	Siyah / Black	XS	35,0–37,0
AAM-1B	Siyah / Black	S	38,0–41,0
AAM-2B	Siyah / Black	M	42,0–44,0
AAM-3B	Siyah / Black	L	45,0–48,0

ActiveAnkle® Chameleon Brace™

AACB-1B	Siyah / Black	S	38,0–41,0
AACB-2B	Siyah / Black	M	42,0–44,0
AACB-3B	Siyah / Black	L	45,0–48,0

AACB-1W	Beyaz / White	S	38,0–41,0
AACB-2W	Beyaz / White	M	42,0–44,0
AACB-3W	Beyaz / White	L	45,0–48,0

SpiderBrace™

SB0	Siyah / Black	XS	36,0–38,5
SB1	Siyah / Black	S	39,0–41,0
SB2	Siyah / Black	M	42,0–45,0
SB3	Siyah / Black	L	45,5–47,5
SB4	Siyah / Black	XL	48,0–50,0



DARCO Standard Tape

DST	Beyaz / White	3,8 cm × 10,0 m
-----	---------------	-----------------

DARCO Underwrap

DUW-6	Bej / Beige	6,0 cm × 4,0 m
DUW-8	Bej / Beige	8,0 cm × 4,0 m
DUW-20	Bej / Beige	8,0 cm × 20,0 m

DARCO Elastic Tape

DKT-R	Kırmızı / Red	5,0 cm × 5,0 m
DKT-B	Mavi / Blue	5,0 cm × 5,0 m
DKT-S	Siyah / Black	5,0 cm × 5,0 m
DKT-H	Bej / Beige	5,0 cm × 5,0 m

DARCO Tape-Kit

T-KIT	5 × DST Beyaz / White	3,8 cm × 10,0 m
	1 × DKT-B Mavi / Blue	5,0 cm × 5,0 m
	1 × DKT-R Kırmızı / Red	5,0 cm × 5,0 m

Heelift® Traction Boot

DM-HLTB	Bej / Beige	Universal
---------	-------------	-----------

Diyabet bakımı / Diabetic Care

Heelift® Suspension Boot

DM-HLP	Bej/Beige	Küçük/Petite
DM-HL	Bej/Beige	Normal

Heelift® Smooth Boot

DM-HLSP	Bej/Beige	Küçük/Petite
DM-HLS	Bej/Beige	Normal
DM-HLSB	Bej/Beige	Büyük/Bariatric

WCS™

Sol/left:

WCS0B/L	Siyah/Black	XS	36,0'e kadar/up to
WCS1B/L	Siyah/Black	S	37,0-38,0
WCS7B/L	Siyah/Black	S/M	39,0-40,0
WCS2B/L	Siyah/Black	M	41,0-42,0
WCS3B/L	Siyah/Black	L	43,0-44,0
WCS4B/L	Siyah/Black	XL	45,0-46,0
WCS5B/L	Siyah/Black	XXL	47,0-48,0

Sağ/right:

WCS0B/R	Siyah/Black	XS	36,0'e kadar/up to
WCS1B/R	Siyah/Black	S	37,0-38,0
WCS7B/R	Siyah/Black	S/M	39,0-40,0
WCS2B/R	Siyah/Black	M	41,0-42,0
WCS3B/R	Siyah/Black	L	43,0-44,0
WCS4B/R	Siyah/Black	XL	45,0-46,0
WCS5B/R	Siyah/Black	XXL	47,0-48,0

+ İç Taban / Insoles (için/ for WCS, 4 adet / Pieces)

Sol/left:

WCI0/L	XS	36,0'e kadar/up to
WCI1/L	S	37,0-38,0
WCI7/L	S/M	39,0-40,0
WCI2/L	M	41,0-42,0
WCI3/L	L	43,0-44,0
WCI4/L	XL	45,0-46,0
WCI5/L	XXL	47,0-48,0

Sağ/right:

WCI0/R	XS	36,0'e kadar/up to
WCI1/R	S	37,0-38,0
WCI7/R	S/M	39,0-40,0
WCI2/R	M	41,0-42,0
WCI3/R	L	43,0-44,0
WCI4/R	XL	45,0-46,0
WCI5/R	XXL	47,0-48,0

Elbowlift®

DM-EL	Bej/Beige	Universal
-------	-----------	-----------

Bilimsel arařtırmalar / Studies

Bu broşürler řu anda yalnız almanca ve birkaç bölümü de ingilizce olarak edinilebilir.

- D **TAS™ Halluks Valgus Ayak Parmağı Cebiresi kullanıcı beyanları**
- D **TAS™ Halluks Valgus Ayak Parmağı Cebiresi kullanıcı arařtırması**
Dr. med. Kai Olms
- GB **User Study TAS™ Toe Alignment Splint**
Dr. med. Kai Olms, Germany
- E **Estudio De Aplicación Toe Alignment Splint**
Dr. med. Kai Olms, Alemania
- D **Halluks Valgus düzeltme ameliyatından sonra iki ayrı bandajın kıyaslanması: Prospektif Muayene**
Özel Doç. Dr. med. Renée Fuhrmann
- D **NightSplint™ kullanıcı arařtırması**
Dr. med. Wolfram Wenz, Heidelberg Üniversitesi
- D **ActiveAnkle® kullanıcı arařtırması**
Dr. med. Axel Schroth, Augsburg Helsingparc-Kliniğı
- D **BodyArmorWalker™ biyomekanik arařtırma**
Münih Baz Enstitüsü
- GB **Report on Bio-mechanical Study BodyArmor® Walker**
Base Institute Munich, Germany
- D **WCS™ diyabet hastaları için yara bakım ayakkabısının etkileme biçiminin değerlendirilmesi**
Prof. Dr. med. Rosenbaum, Münster Üniversitesi
- GB **Functional Evaluation of the DARCO WCS™ Wound Care Shoe System for Diabetic Patients**
Prof. Dr. med. Rosenbaum, University Münster, Germany
- D **DARCO Komandit Şirket Ortaklı Limited Şirketinin çeşitli ön ayakta basınç azaltan modelleri ile bağlantılı olarak plantar basınç dağıtımı için kıyaslayıcı inceleme**
Prof. Dr. med. Rosenbaum, Münster Üniversitesi
- D **ST-ayakkabıların plantar basınç dağıtımı hakkında kıyaslayıcı arařtırma**
Prof. Dr. med. Rosenbaum, Münster Üniversitesi
- D **The Effectiveness of a Modified Wedge Shoe in Reducing Pressure at the Area of Previous Great Toe Ulceration in Individuals with Diabetes Mellitus**
James Birke, PT, PhD, CPed; Karen Lewis, MPT, JD;
Ana Penton, MPT; Dawn Pittman, MPT; Allison Tucker, MPT;
Catalina Durand, MPT

Lütfen fotokopisini alın, gerekli bölümleri doldurun ve postalayın yahut řu numaraya fakslayın:
Please copy, fill in and post off or send by fax to: **+49 (0) 88 07.92 28-22**

İsim, Muayenehane, Klinik / Name, Praxis, Clinic

Adres / Address

Telefon, E-Posta / Telephone, e-mail



**Yayımcı ve içeriğinden sorumlu
Publisher and
responsible for contents**

DARCO GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de

**Tasarım ve düzenleme
Concept and design**

westcoastvideo
www.westcoastvideo.de

**Fotoğraflar
Product photography**

DARCO GmbH & Co. KG

Son baskı / Last update

Ekim 2009

© DARCO 2009